



platinum
STAIRLIFTS

CURVE

Skræddersyet komfort



www.platinumstairlifts.com

CURVE

SPECIFIKATIONER

- Ultra-tynd dobbeltskinne
- Stille og komfortabel kørsel
- Ergonomisk formet vippekontakt
- Tæt indvendig sveng med 200 mm venderadius
- Monteres direkte på trappen
- Revolutionerende ERGO-stol
- Diagnostisk display i armlænet
- Fjernbetjening
- Selvoprullende sikkerhedssele
- Velegnet til brugere op til 120 kg

TILVALG

- Elektrisk betjent drejesæde
- Elektrisk betjent fodstøtte
- Håndtag til udfoldning af fodstøtte
- Beskyttelse til skinneben
- Radiostyret fjernbetjening
- Stol velegnet til brugere op til 160 kg
- ERGO Space-stol for smalle trapper, sparer op til 60 mm i kombination med en ERGO standard-sæde og 85 mm med en ERGO Plus-sæde.



Ergonomisk formet vippekontakt




Drejesæde



Justerbar ryglæn



Diagnostisk display i armlænet

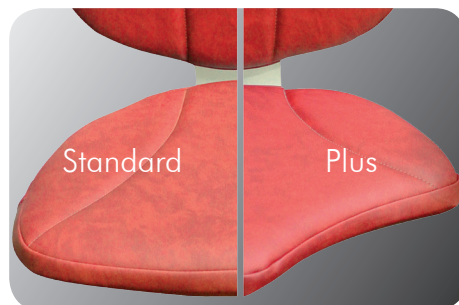

ERGO-sæde

Skræddersyet komfort

Platinum Curve er skræddersyet i Storbritannien og lavet til at passe til din trappe perfekt. Den er fuldt justerbar til din størrelse og kropstype.

Bøjninger, svinger og hjørn er ikke noget problem for din Curve fordi skinnen er skræddersyet til at passe din trappe. Platinum Curve hjælper dig med at genvinde friheden i dit eget hjem och en sikker og behagelig rejse.

Curve har en kompakt design og er monteret direkte på trappen. Den optager så lidt plads som muligt og trenger ingen ombygning.

Platinum Curve er den absolut bedste stoleliften for kurvede trapper.



Curve med ERGO Space-stol og ERGO Plus-sæde.



enquiries@platinumstairlifts.com

platinum
STAIRLIFTS

CURVE

Fem enkle trin til at overvinde din trappe



1

Sænk sæde og armlæn. Fold ud fodstøtten og din Curve stolelift er klar til brug. Displayen viser 'Platinum' som betyder at du er klar til at gå.



2

Ved montering justeres stol til din størrelse og kropstype, så alt hvad du skal gøre er at spænde dig fast, læne dig tilbage, slappe af og nyde av turen!




3

For at starte din Platinum Curve stolelift, brug den ergonomisk formet vippekontakten i armlænet ved a presse den i den retning, du ønsker.



4

Brug håndtag til drejefunktion når du når toppen av trappen (eller hold vippekontakten inde hvis du har valgt elektrisk drejesæde) for at dreje stol automatisk.

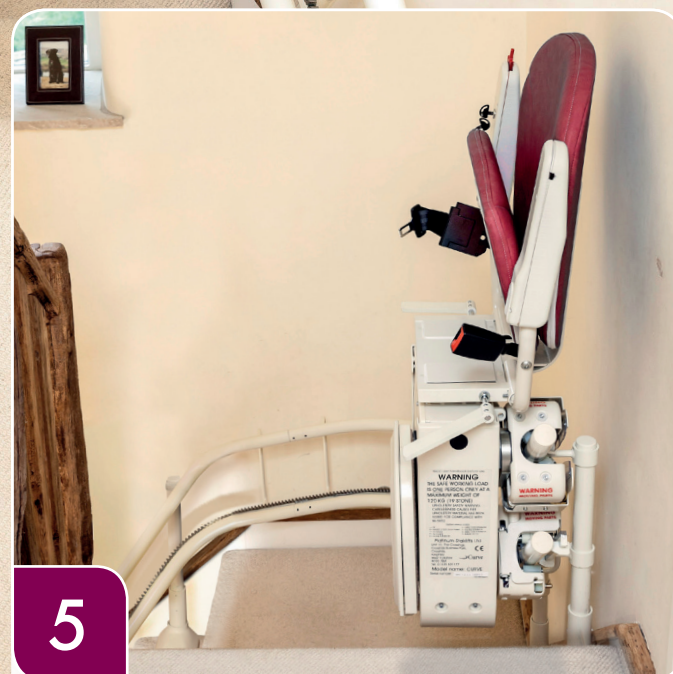

5

Når din Curve stolelift ikke er i brug, kan stol foldes og stolen kan parkeres på trappen, så den optager minimal plads.

ERGO


Platinum ERGO-stol er en af de mest avancerede stole på markedet. ERGO-stol er fuldt justerbart til brugerens størrelse og kropstype og leveres med mange indbyggede funktioner. ERGO-stol er standard på Curve. Kontakt din forhandler for mere information.




Ergonomisk formet vippekontakt
Fuld kontrol lige ved hånden.



Nøgleafbryder
Undgå uautoriseret brug af liften.

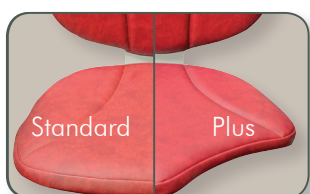

ERGO-sæde
ERGO passer alle størrelser og kropstyper.

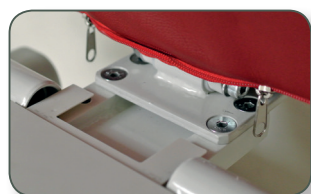

Justerbar ryglæn
Tillader en horizontal justering af stol. I kombination med at stol har flere positioner, tilbyder ERGO mange indstillingsmuligheder.



Diagnostisk display i armlænet
Let at aflæse.



Selvopprullende sikkerhedssele
Ekstra sikkerhed når liften er i brug.



Håndtag til udfoldning af fodstøtte
Let at folde ud og ind.



Trykfølsomme plader
Bereket til at stoppe liften, hvis den møder nogle forhindringer.

Vægtgrænse

120 kg



ERGOSPACE

ERGO Space-stol er kompakt og designet til smalle trapper og giver 60mm ekstra plads i forhold til ERGO Standard-stol. I kombination med en ERGO Plus-sæde sparer den ydeligere 25mm, hvilket giver i alt 85mm ekstra plads.

Ryglænet er 80mm korter end ERGO Standard-stol og er formet rundt brugeren. Dette gør den komfortable og mere praktisk i smalle trapper.



Vægtgrænse

120 kg

ERGOHD

ERGO HD-stol tilbyder de same funktioner som ERGO Standard-stol, men har en løftekapacitet på op til 160kg.

Stoler med mere løftekapacitet har normalt kompromitteret med design for at tilpasse større brugere, men ikke ERGO HD!

Størrelse, form, sædehøjde og æstetisk design er identisk med Standard-stol, men har yderligere mekanisk støtte i chassit under stol.

Nu kan alle nyde af den ekstra komfort som ERGO tilbyder!



Vægtgrænse

160 kg



enquiries@platinumstairlifts.com

platinum
STAIRLIFTS



CURVE

ERGO Farvevalg



Tilgængelig på ERGO & ERGO HD.



Forhandler & installatør



Firskovvej 6 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf 39 20 20 07
info@johlhumancare.dk - www.johlhumancare.dk



www.platinumstairlifts.com

DAN Curve 11/2015
© 2015 Platinum Stairlifts Limited