

# STOLELØFTEREN

NY MODEL




JØHL

## Stoleløfteren

**At håndtere tunge løft og forflytninger skal kunne udføres uden at belaste og nedslide kroppen, netop derfor har vi udviklet "Stoleløfteren" et hjælpemiddel der ikke bare skåner kroppen, men også møbler og gulv.**

Den nuværende løsning på at forflytte en stol til og fra spisebordet er at påskruer små hjul på stolen, man kan så vippe, skubbe og mase stolen til og fra bordet. Denne løsning er dog langt fra hensigtsmæssig, udover at man belaster kroppen unødigt meget er løsningen dyr og besværlig, hjulene skal monteres på alle stole, de skal regelmæssigt efterspændes, stolene går fra hinanden og skal ofte limes og til sidst udskiftes – en på alle måder dyr løsning – vælg i stedet "Stoleløfteren"

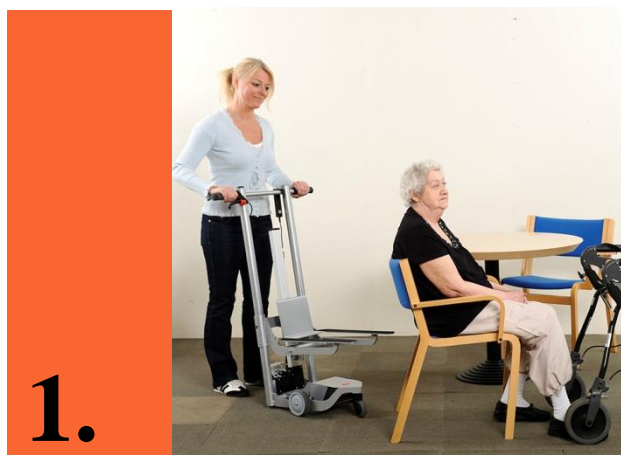

1.


Vi har udviklet stoleløfteren med det for øje, at den skal være nem, sikker og enkel at bruge. Den er derfor elektrisk højdeindstillelig, der er ingen besværlige tilpasninger og justeringer før et løft.

Den tomme stol kan sættes tilpas væk fra bordet, hermed er der god plads til både brugeren og en eventuel rollator.



2.

Når brugeren har sat sig, køres stoleløfteren nemt og enkelt ind under stolen. Stoleløfteren er udført med store hjul på midten, den kan dermed dreje om sin egen akse, hvilket gør det ekstra nemt og skånsomt at køre, dreje og placere stolen/brugeren. Det kræver et minimum af kræfter og du skåner din ryg og led.

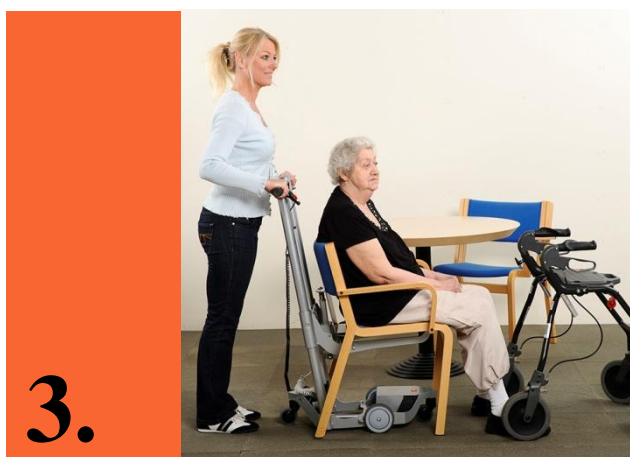

3.



Det elektriske løft gør det nemt at løfte og sænke stolen. Stoleløfteren løfter 150kg. Udover at det indbyggede ligestillings-beslag gør, at stolen altid løftes vandret op og ned, sikre det også, at man uanset stolens udformning slipper for manuel tilpasning og justering.



4.




Brugeren placeres præcis hvor det ønskes. Stoleløfteren sænkes og køres til siden for parkering. På grund af dens lille størrelse kan stoleløfteren parkeres i umiddelbar nærhed af bordet, den er dermed nemt tilgængelig og klar når brugeren igen skal rejse sig fra bordet.



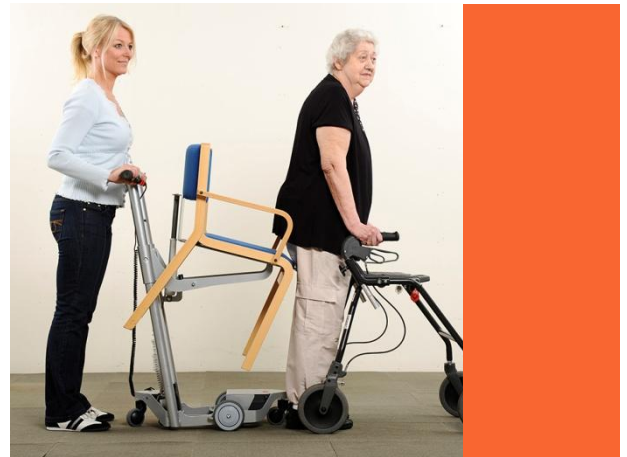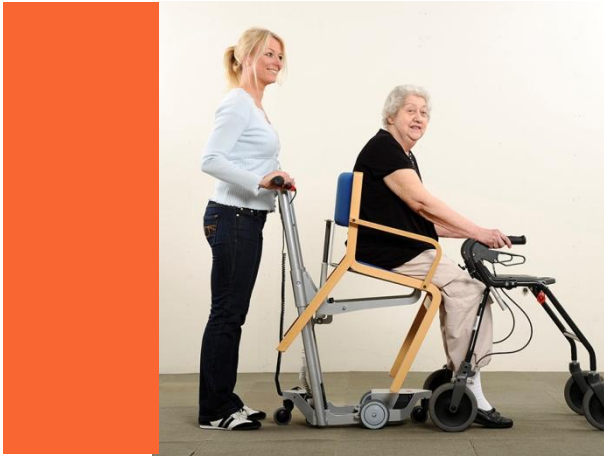

For brugere som har brug for ekstra hjælp til at rejse sig, kan man i de fleste tilfælde (lidt afhængig af stoletype og brugers samarbejdsevne) med fordel udnytte stoleløfterens vippe funktion som oprejsnings-hjælp. Stoleløfterens håndbremse trykkes ind

Stoleløften hæves, brugerens fødder skal forsat have kontakt med gulvet. I takt med at brugeren læner sig fremover vipper stolens bagende og hjælper dermed til en nemmere og mere sikker oprejsning. Som nået nyt tilbydes denne funktion nu også elektrisk.

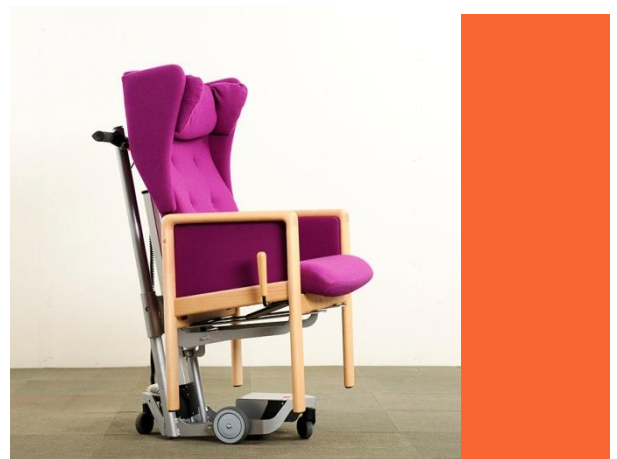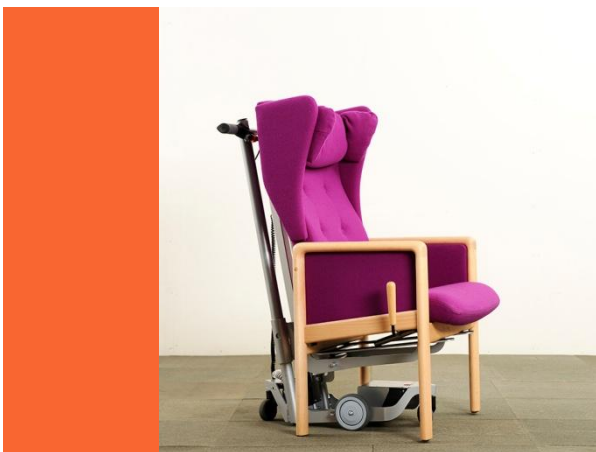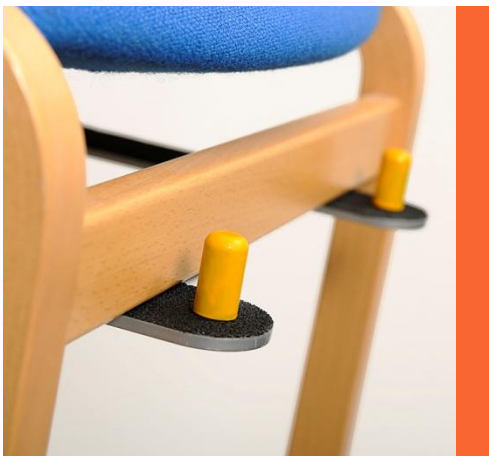

Stoleløfterens nye udformning muliggør løft af endnu flere varianter af stole, selv lænestole som ofte er meget lave og med stor sædedybde er nu mulig at løfte.



Stoleløftens op ned funktion betjenes nemt og enkelt på knappen ved siden af håndtaget.



Stoleløfteren lades nemt med den medfølgende lader.



Har man behov for regelmæssigt at veje en bruger/beboer har vi udviklet en digitalvægt for montering direkte på Stoleløfteren.

Udover at man undgår at investere i en separat stolevægt, undgår man også besværet med at løfte og forflytte brugeren over på stolevægten.

Med denne digitalvægt monteret på stoleløfteren, løfter man blot brugeren siddende i stolen, man har forinden nulstillet vægten med stolen på og man kan nu aflæse brugerens vægt i displayet.

Med denne vægt er det nemt og ubesværet at følge med i en brugers vægt fra dag til dag.

Vægt og stoleløftere kan bestilles samlet men vægten kan også bestilles separat for senere montering.

## Model betegnelse

Stoleløfter - 26000 - standard uden håndbremse

Stoleløfter - 25000 - med håndbremse

Stoleløfter - 24000 - med håndbremse og motor vip

Digitalvægt - 205071

# JØHL

Bryggervangen 20 \* 2100 København Ø \* Telefon 3920 2007  
www.iohlhumancare.dk \* info@iohlhumancare.dk